

PIPETBOY *acu*



Leicht, bunt und immer betriebsbereit

PIPETBOY *acu*

Der ungeschlagene Klassiker unter den Pipettierhilfen



classic



Bunte Farbvielfalt

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und bringen Sie Farbe ins Labor! Vermeiden Sie Verwechslungen durch den Einsatz verschiedenfarbiger **PIPETBOY acu**. Verwenden Sie unterschiedliche Farben für Ihre Anwendungen und Laborbereiche.




Totale Vielseitigkeit

Der **PIPETBOY acu** ist für den Einsatz aller handelsüblichen serologischen Pipetten perfekt geeignet. Der Pipettenhaltergummi aus Silikon garantiert einen sicheren und festen Halt. Er ist flexibel, dauerhaft beständig und autoklavierbar.



Präzises Dosieren

Die Dosierknöpfe garantieren feinste Regulation. In Kombination mit der Geschwindigkeitseinstellung ist eine Anpassung für alle Anwendungen möglich.

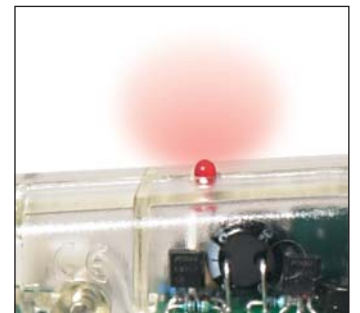

Batterieanzeige

Eine rot blinkende LED-Anzeige signalisiert, dass die Batterie aufgeladen werden muss.



grün



rot



blau



transparent



violett



Leichtgewicht

Der **PIPETBOY acu** ist leicht wie eine Feder und ergonomisch optimal für einfaches Handling.



Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung

Mit der Rändelschraube kann die Pipettiergeschwindigkeit für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten schnell und bequem eingestellt werden.



Maximale Sicherheit

Der leicht zu wechselnde Sterilfilter schützt den **PIPETBOY acu** vor Kontaminationen und Beschädigungen durch angesaugte Feuchtigkeit. Zudem können Pipettenhalter, Silikon-gummi und die "Pipettennase" autoklaviert werden - so sicher und einfach!

Immer einsatzbereit

Die neue langlebige und umweltverträgliche NiMH-Akku Technologie, die im **PIPETBOY acu** zum Einsatz kommt, macht das Gerät für Ihre Anwendungen konstant einsatzbereit. Keine Wartezeiten! Das Aufladen kann von alleine geschehen, während Sie mit dem Gerät arbeiten.

PIPETBOY *acu*

Bestellinformationen

Beschreibung	Einheit	Art.-Nr.
PIPETBOY <i>acu</i> classic, inkl. Wandhalter, Netzadapter, 9 V NiMH-Akku	1	155 000
PIPETBOY <i>acu</i> grün, wie Art.-Nr. 155000	1	155 015
PIPETBOY <i>acu</i> rot, wie Art.-Nr. 155000	1	155 016
PIPETBOY <i>acu</i> blau, wie Art.-Nr. 155000	1	155 017
PIPETBOY <i>acu</i> transparent, wie Art.-Nr. 155000	1	155 018
PIPETBOY <i>acu</i> violett, wie Art.-Nr. 155000	1	155 019

Zubehör

Nr.	Beschreibung	Einheit	Art.-Nr.
1	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> classic	1	155 203
	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> grün	1	155 160
	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> rot	1	155 161
	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> blau	1	155 162
	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> transparent	1	155 163
	Batteriefachdeckel für PIPETBOY <i>acu</i> violett	1	155 164
8	O-Ring	1	153 203
9	Pipettenhalter, grau, inkl. O-Ring, für PIPETBOY <i>acu</i> grün, blau, rot und violett	1	155 060
	Pipettenhalter, grau, inkl. O-Ring für PIPETBOY <i>acu</i> classic und transparent	1	155 230
10	Filtergummi	1	153 225
11	Sterilfilter, Porengrösse 0,45 µm	1	153 015
12	Pipettenhaltergummi	1	151 020
13	Sterilmodul, komplett, für PIPETBOY <i>acu</i> classic und transparent	1	155 025
	Sterilmodul, komplett, für PIPETBOY <i>acu</i> grün, blau, rot und violett	1	155 070
20	9-V NiMH-Akku	1	153 005
	Separates Schnell-Ladegerät	1	153 010
	Netzadapter 220 V / 50 Hz	1	153 210
	Wandhalter für Handgriff	1	151 005


Technische Daten

Abmessungen (LxBxH):	PIPETBOY <i>acu</i> :	125 x 130 x 35 mm
	Netzadapter:	75 x 45 x 45 mm
Gewicht:	PIPETBOY <i>acu</i> :	220 g
	Netzadapter:	200 g
Akku:	1 x 9 V NiMH	170 mAh
Betriebsbedingungen:	5 – 40°C, max. 80% RH	



Der **PIPETBOY** *acu* wurde so konstruiert, dass Teile auf sehr einfache Weise ausgetauscht werden können. Das geht sehr schnell... der **PIPETBOY** *acu* ist sofort wieder einsatzbereit!

Folgende Teile in der Abbildung unten können separat bestellt werden:

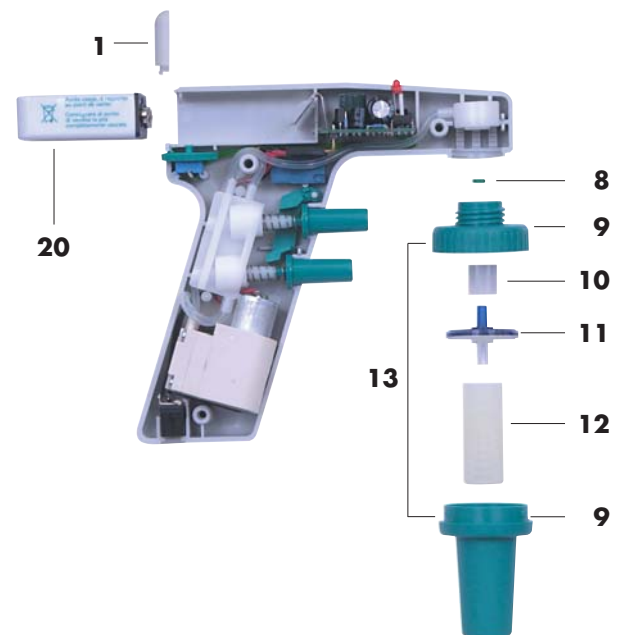

INTEGRA Biosciences GmbH

Ruhberg 4
D - 35463 Fernwald
Tel.: 06404-809-0
Fax: 06404-5865
E-mail: info@integra-biosciences.de
www.integra-biosciences.de