

# VACUBOY



Multifunktionaler Handoperator für Vakuum-Systeme

# VACUBOY

## Der **VACUBOY** ist geeignet für...

Der **VACUBOY** Handoperator ist ein **exzellentes Werkzeug**, um ein kontrolliertes Absaugen und Beseitigen von Flüssigkeiten zu ermöglichen. Man kann so aus Küvetten, Microplates, Tubes, Petrischalen, Zellkulturflaschen, Rollerflaschen, Bioreaktoren und anderen typischen Laborgefäßen absolut sicher jegliche Flüssigkeit absaugen.

Der **VACUBOY** Handoperator ist so geschaffen, dass man ihn für eine Vielfalt unterschiedlicher Applikationen unter Einsatz von zahlreichen Absaugadaptern aus Edelstahl, Pasteur- und serologischen Pipetten oder Pipettenspitzen benutzen kann. Jeder Adapter wurde in seinem Design perfekt auf die physikalischen Abmessungen und Geometrie der typischen Laborbehälter aus Glas und Kunststoff abgestimmt.

Darüberhinaus kann er an jede schon im Labor vorhandene Vakuumquelle als ideale **Systemverbesserung** optimal angeschlossen werden.

### Vorteile

- einfachste und zeitsparende Handhabung
- ergonomisches Design entlastet bei anstrengenden Wiederholungsabläufen in den Absaugprozeduren
- Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, sind **autoklavierbar!**
- an allen Vakuumquellen verwendbar (z.B. **VACUSAFE comfort**, Wasserstrahlpumpen, Hausvakuum, sonstige externe Vakuumpumpen)

### Zubehör

Ein- und Mehrkanalabsaugadapter:

- 1-Kanal (40, 150, 280 mm)
- 4-Kanal
- 8-Kanal

Für verschiedene Aufsätze und Tips:

- Pasteur / Serologische Pipetten
- Edelstahl-Adapter
- Disposable Tips (1- und 8-Kanal-Adapter, mit/ohne Abwurfvorrichtung)



## ...alle Anwendungen



T-Flaschen



Rollerflaschen



Mikrotiterplatten



Erlenmeyerkolben



6-well Platten


...alle Vakuum-Quellen




**VACUSAFE** *comfort* (158 310)




Ständer mit 4-L PP-Flasche (158 445)

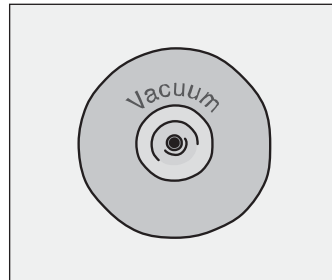

Hausvakuum-Systeme

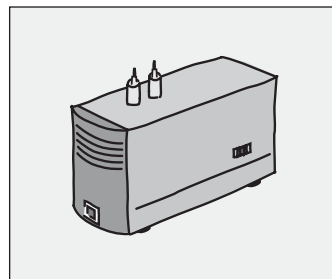

Absaug-Systeme

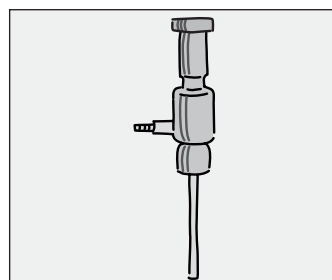

Wasserstrahlpumpe

# VACUBOY

## Bestellinformationen

Beschreibung	Art.-Nr.
--------------	----------

<b>VACUBOY Handoperator</b>	155 510
-----------------------------	---------

H VACUBOY Handoperator	
------------------------	--

K Gummi-Adapter für Pasteurpipetten	
-------------------------------------	--

B 1-Kanal Edelstahladapter 40 mm	
----------------------------------	--

<b>VACUBOY Handoperator-Set</b>	155 500
---------------------------------	---------

H VACUBOY Handoperator	
------------------------	--

L Ständer für Handoperator	
----------------------------	--

K Gummi-Adapter für Pasteurpipetten	
-------------------------------------	--

B 1-Kanal Edelstahladapter 40 mm	
----------------------------------	--

E 8-Kanal Edelstahladapter 40 mm	
----------------------------------	--

A 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips	
--------------------------------------	--

I 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung	
--	--

G 8-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung	
--	--

Zubehör / Ersatzteile	Art.-Nr.
-----------------------	----------

A 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips	155 504
--------------------------------------	---------

I 1-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung	155 526
--	---------

C 1-Kanal Edelstahladapter 150 mm	155 522
-----------------------------------	---------

D 1-Kanal Edelstahladapter 280 mm	155 525
-----------------------------------	---------

B 1-Kanal Edelstahladapter 40 mm	155 502
----------------------------------	---------

F 4-Kanal Edelstahladapter 40 mm	155 524
----------------------------------	---------

G 8-Kanal Kunststoffadapter für Tips mit Abwurfvorrichtung	155 520
--	---------

E 8-Kanal Edelstahladapter 40 mm	155 503
----------------------------------	---------

4-Liter PP-Flasche	158 370
--------------------	---------

Ständer für 4-Liter PP-Flasche	158 445
--------------------------------	---------

Deckel zu 4-Liter PP-Flasche, mit Schlauchanschlüssen	158 372
---	---------

VACUSAFE Protect-Filter, 0.45 µm	158 015
----------------------------------	---------



K Gummi-Adapter für Pasteurpipetten	155 505
-------------------------------------	---------

L Ständer für VACUBOY Handoperator	155 501
------------------------------------	---------

Schlauch (Handoperator-Flasche), 180 cm	158 332
---	---------

Schlauch (Gerät-Flasche), 70 cm	158 331
---------------------------------	---------

## VACUBOY Handoperator-Set 155 500

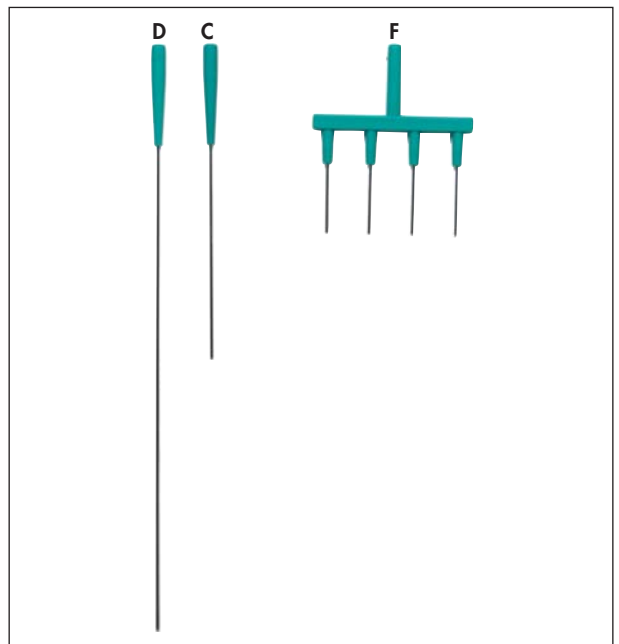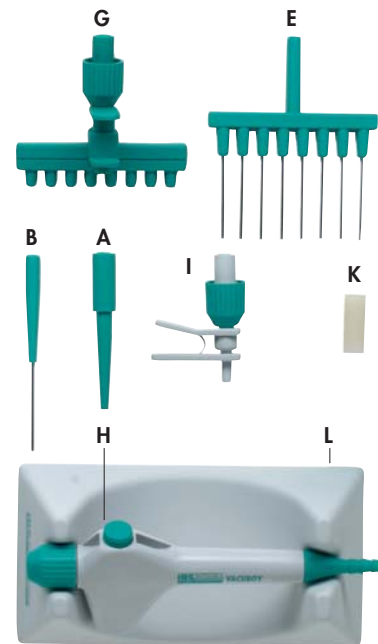

**CE**  
Swiss made

### INTEGRA Biosciences GmbH

Ruhberg 4  
D - 35463 Fernwald  
Tel.: 06404-809-0  
Fax: 06404-5865  
E-mail: info@integra-biosciences.de  
www.integra-biosciences.de